


HANNKERDENTAL

Digitales Waxup mit Exocad





Auftrag anlegen

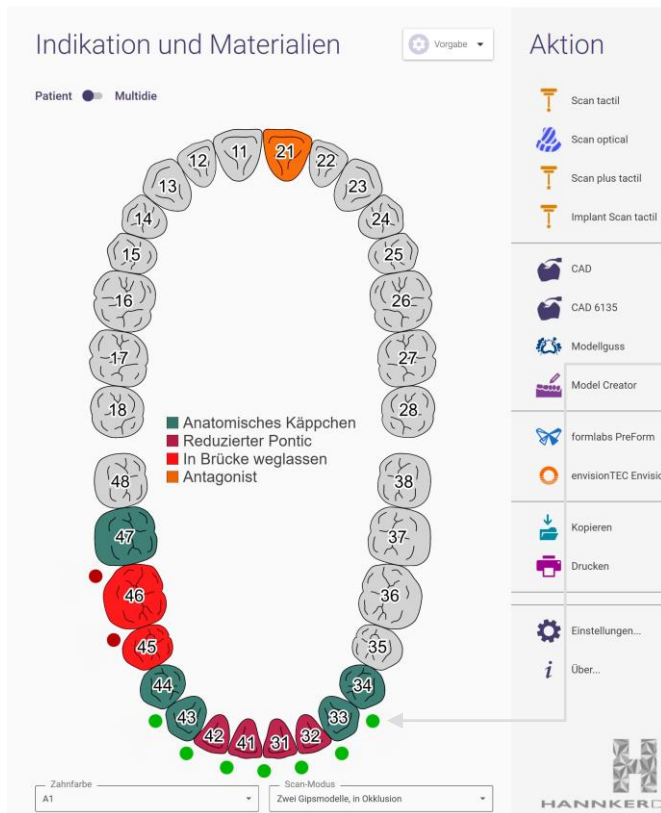

- ▶ Brückenkonstruktion
- ▶ Materialauswahl kann beliebig gewählt werden
- ▶ Mindestdicke beachten
- ▶ Verbinder angeben




- ▶ Primärkronen auf dem Modell scannen
- ▶ (mit Scanspray)

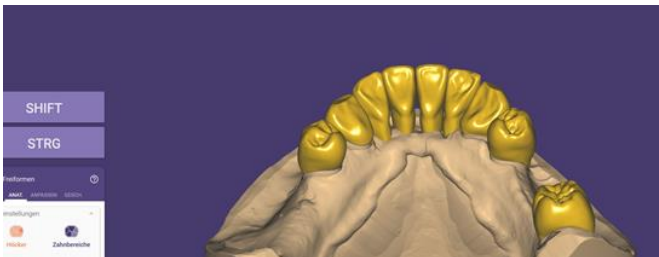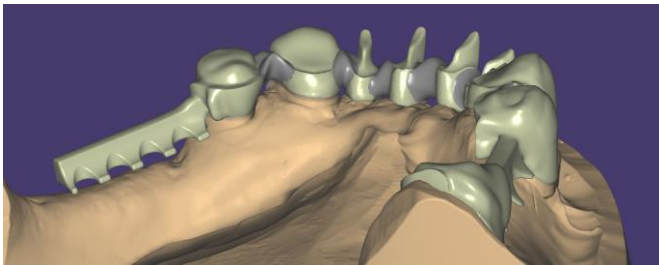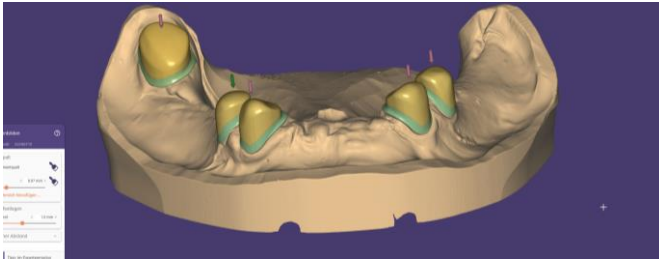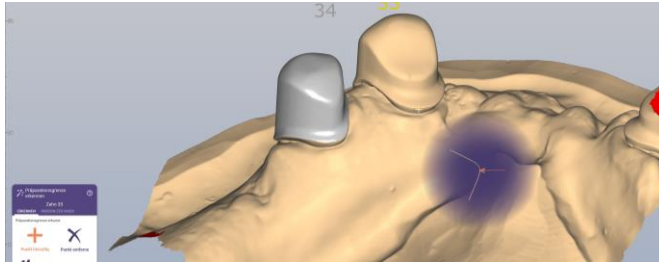

Brücke wie gewünscht konstruieren

- ▶ Parameter werden von uns ersetzt
- ▶ Verbinder kontrollieren

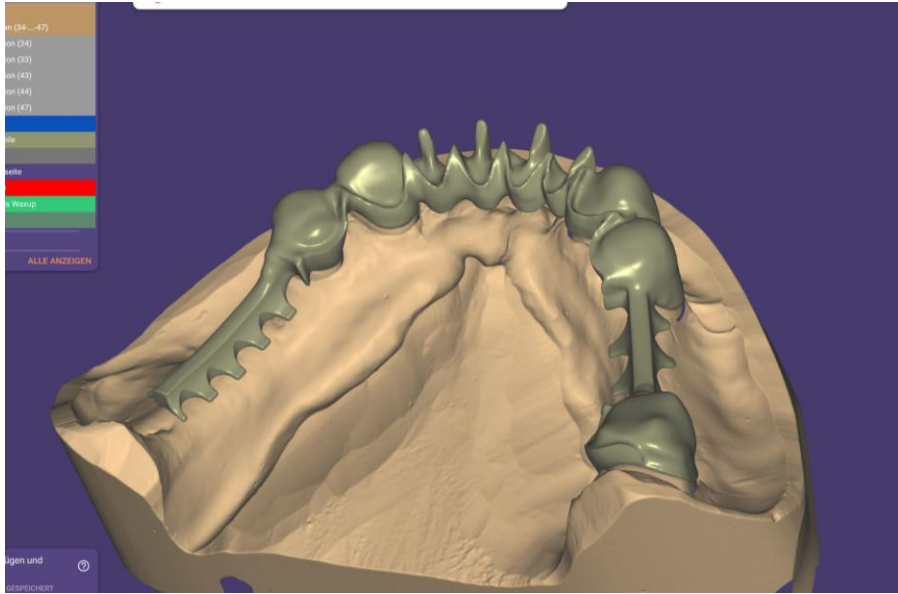

Brücke zusammenfügen

→ Bitte optimieren für
Freiformen und 3D-
Druck anklicken, damit
es ein STL wird und die
Verbinder mit der
Konstruktion
verschmolzen werden

Zusammenfügen und speichern ⓘ
ALS NÄCHSTES: GESPEICHERT

Design fertig! Ausgabedaten in Projektverzeichnis gespeichert.

Nächster Schritt:

Ich bin fertig

Fertige Teile freiformen

Zusammenfügen und speichern ⓘ
ALS NÄCHSTES: GESPEICHERT

Zusammenführen neu starten


Zusammenführen abbrechen

Zusammengef. Teile entfernen


Optimieren für besseres Freiformen und 3D-Druck

Waxup abspeichern

- ▶ NUR Kieferscan
mit Fertige Teile
einblenden

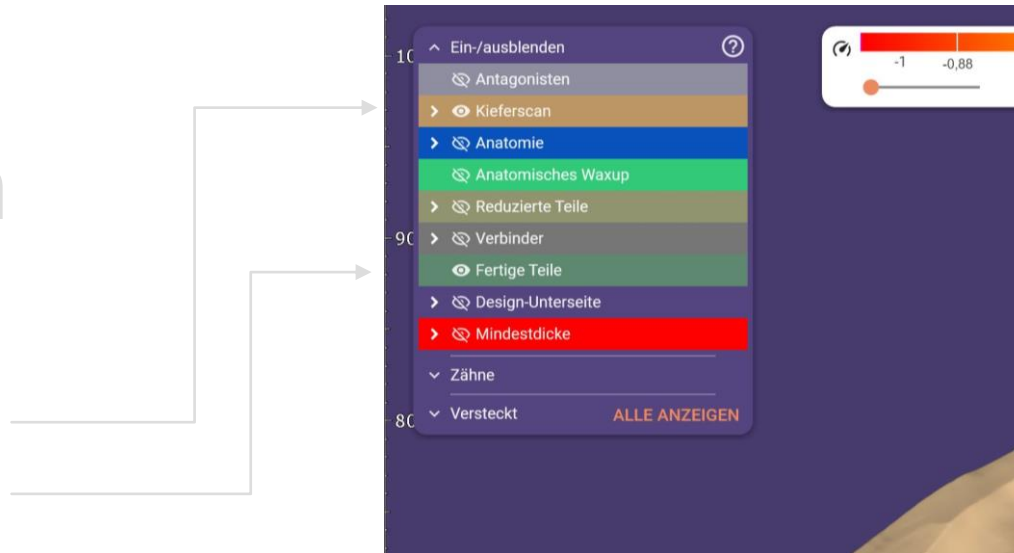

- ▶ Irgendwo in das Feld
klicken und als STL
abspeichern
- ▶ z.B. Waxup_Modell

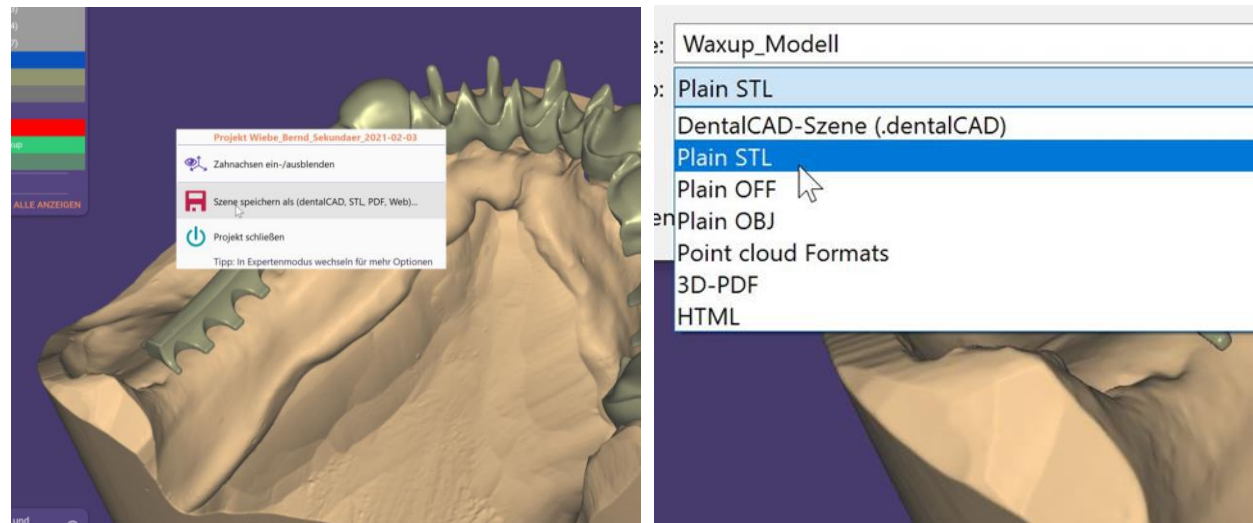

Auftrag versenden

- ▶ Im Browser in unser Auftragsformular einloggen: <https://hannker-dental.de/auftrag/login.php>
- ▶ Auftrag ausfüllen
- ▶ Datei einfügen



Bitte geben Sie zur Bearbeitung Ihre vollständigen Frisurdaten ein. Für Rückfragen hierzu können Sie uns unter der Rufnummer Standort Hude +49 (0) 5443 / 9985112 erreichen.

Datum: 05.02.2021

Auftraggeber: Hannker Hude

Patient: _____

Sicherheitsdatenblätter (PDF): Glaskeramik et. Metall PMMA etc. Zirkon

Intraoralscan:

Material: Info Parameter Bitte auswählen

Termin: Bitte geben Sie einen Terminwunsch ein!

Folienprotokoll

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		

Verblockung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten: Waxup

STL Scandaten vorhanden: Datei hochladen

Gesamt von TK: _____

Gefräst von TK: _____

Senden

© 2021 by Hannker Dental Impressum

Bei Fragen sind wir gerne für Euch da!
+49 (0)5443 92 98 29

Vielen Dank

